GUIDE TECHNIQUE
Hippocampe Marathon







Le fauteuil roulant de course

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Accessoires du produit	04
Conditions d'utilisation / d'installation	05
Garantie	05
Références	06

DÉFINITION DU PRODUIT


Le fauteuil Hippocampe Marathon ressemble à son confrère l'Hippocampe classique, il a cependant la particularité d'être spécialement conçu pour la course à pied sur route ou dans des chemins (roues trails en option). Fabriqué en France, ce fauteuil vous permettra de relever des défis sportifs avec vos proches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Charge admissible	Couleur(s)
70 cm	1,75 m (taille M)	De 103 à 128 cm	17 kg	100 kg	Rouge et noir

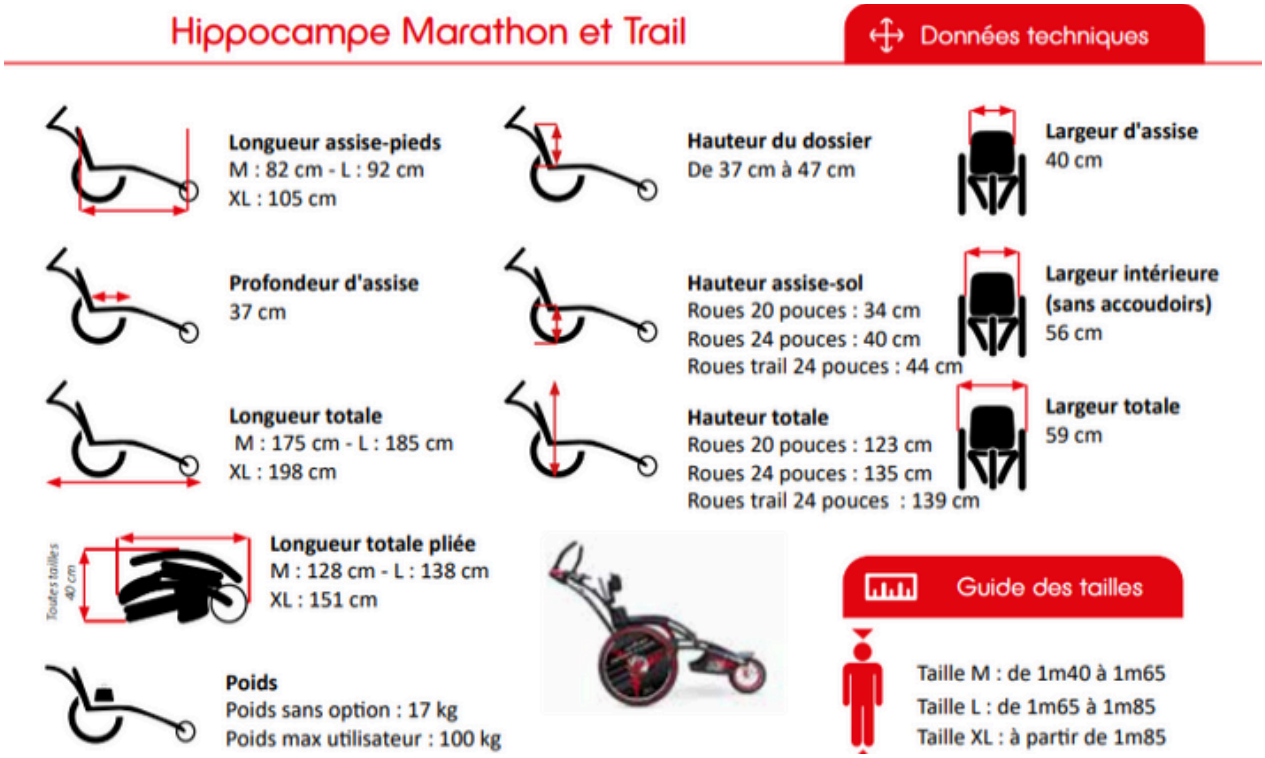

COMPOSITION :

- **Des roues légères** : Les roues fauteuil roulant à rayons et légères, favorisent la prise de vitesse sur la route. Les pneus fins, avec leur surface de roulement optimisée augmente le rendement. Des roues tout-terrain en option s'adaptent au fauteuil de course pour faire du tout-terrain.

- **Un châssis léger en aluminium** : Le poids du fauteuil, environ 17 kg, permet une prise de vitesse rapide.

- **Sécurité du fauteuil roulant et accessoire**s : Tous les fauteuils marathons sont équipés de plusieurs accessoires de sécurité. Deux filets d'accoudoirs protègent les mains de l'utilisateur, et un filet entre l'assise et le capot repose pieds sécurise les pieds. Une sangle de sécurité assure un lien entre le pousseur et l'utilisateur.

- **Freins à disques avec roues extractibles** : Le système de freins à disques assure un freinage efficace. Le système de verrouillage et d'extraction innovant facilite le démontage et le changement des roues. Cette fonction permet un démontage rapide de la poussette de course hippocampe, et assure un encombrement minimum une fois démontée.

- **Stabilité et maniabilité** : L'assise basse du fauteuil de course assure une bonne stabilité. La poussette pour handicapés marathon est équilibrée et le design du guidon avec ses poignées latérales optimise les changements de trajectoires.



ATOUTS

- Fauteuil tout-terrain
- 3 tailles disponibles - s'adapte à toutes les morphologies
- Utilisateur autonome
- Nombreuses options disponibles
- S'adapte à tous les types de sols
- Léger et facilement transportable
- Fabriqué en France

ACCESSOIRES DU PRODUIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

Barre de poussée amovible :
Une barre de poussée amovible est fournie afin de pouvoir aider l'utilisateur lors de ses déplacements. Cette barre s'installe et s'enlève très facilement grâce à un système de clips.





Accoudoirs réglables et orientables

Amovibles et pivotants, ils facilitent les transferts sur le fauteuil.



Roues 20 pouces

Equipées de flasques, elles protègent les mains de l'utilisateur lors d'épreuves sportives.



Freins à disque

Ils permettent au pousseur d'optimiser le freinage en pente, et de faciliter l'arrêt immédiat du fauteuil en appuyant sur les poignées de freins de la barre de poussée.

OPTIONS DISPONIBLES :



Appui-tête réglable

S'adapte à la morphologie de l'utilisateur grâce à ses réglages en hauteur et en profondeur.



Dossier réglable

Réglable en hauteur et inclinable, il s'ajuste parfaitement à l'utilisateur.



Ceinture ventrale

Elle optimise le positionnement de l'utilisateur au fond de l'assise.



Harnais mixte

En néoprène élastique, confortable et résistant à l'eau, il facilite le maintien et le positionnement de l'utilisateur.



Housse thermique

Confortable et résistante cette housse thermique protège l'utilisateur du froid et de la pluie.



Paire de roues Marathon 24 pouces

Equipées de flasques design et légères, elles favorisent la prise de vitesse.



Sac dossier

Le sac dossier permet de transporter vos objets personnels durant vos loisirs.



Paire de roues trail 24 pouces

Equipées de flasques design ces roues tout-chemin vous permettront d'accéder à des terrains variés en toute sécurité.



Housse de transport

Elle protège votrefauteuil lors de vos déplacements en voiture ou en avion.



CONDITIONS D'UTILISATION / D'INSTALLATION

Le fauteuil Hippocampe® Marathon permet une utilisation en toute autonomie ou accompagné d'une escorte grâce à son kit de traction et sa barre de poussée. Il peut être utilisé sur différents types de sols : sable, herbe, neige, gravier, boue etc.
Muni de roues à roulements à billes, de freins à disques et d'une barre de poussée ergonomique, la poussette marathon prend facilement de la vitesse. Avec son assise basse, le fauteuil hippocampe reste stable et confortable, même dans les virages rapides. C'est le partenaire idéal pour vos défis sportifs.

MONTAGE

Le fauteuil Hippocampe Marathon et trail est composé de trois roues, d'un châssis et de deux accoudoirs.
Le dossier du fauteuil est rabattable et les roues démontables, ce qui rend le fauteuil facilement transportable et stockable.
Grace à son système innovant de freins et sa barre de poussée amovible, ce fauteuil roulant randonnée et course à pied est facilement démontable et transportable dans son sac de voyage.

GARANTIE

Deschamps Access offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit de Deschamps Access.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit de Deschamps Access.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement Deschamps Access. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de Deschamps Access. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES









Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme de fauteuils et équipements